

超音波美容器

Model-6702

仕 様

- 電源・交流：100V
- 消費電力：18W
- 超音波周波数：1MHz
- 積算タイマー：15分
- 本体重量：1.6Kg
- 寸 法：220×240×70mm



超音波美容器 美 瘦

Keep the Charming Body by Ultra sound

Model 6702

取扱説明書



株式会社 ホーマイオン研究所

本社 東京都渋谷区神泉町17-2 03(3464)6655

●ご購入後は必ず本取扱説明書をお読みください。

目 次

必ずお読みください。	3
安全上の注意	4
1.ご使用に成る前に	5
2.各部の名称	6
3.機器の準備	7
4.使用方法①	8
使用方法②	9
使用方法③	10
5.ご使用上の注意	11
6.使用後の保管要領	12
こんな場合は故障ではありません	13
アフターサービス	14
保証規定	15

必ずお読みください

お買上いただき誠にありがとうございます。

本製品は、当社の長年の研究と超音波の特性を応用した、超音波美容器です。

みなさまが安全に本機器を使用し、機器のすばらしさを実感できますように、本取扱説明書は作られています。本器の使用法はいたって簡単なものですが、使用方法によっては十分な効果が得られないばかりか、危険を伴う場合があります。従いまして、取扱説明書は、一度すべての項目をよく読み、理解してから機器を扱うようにしてください。また、本取扱説明書は保証書を兼ねております。紛失しないよう大切に保管してください。

本機器は医療用具ではありません。医療用具のように一定の効果を保証するものではありませんので、使用に際しては十分ご理解の上ご使用ください。

安全上の注意




ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

私どもの製品は、機器の安全性につきまして、十分に考慮した設計になっております。しかし、目的以外の使用や、誤った使用方法によってお買い上げいただきましたお客様の身体や財産に損害を与える結果を招くおそれがあります。




ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じる恐れのある内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。
 「警告」：人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。
 「注意」：人が損害を負う可能性及び物質的障害のみの発生が想定される内容。

表示の例


	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な内容が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるもので、図の中に具体的な内容が描かれています。
	Ⓢ記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な内容が描かれています。

① ご使用になる前に

 注 意	
	・ 次のような症状ある人は本機器を使用しないでください。 1. 急性疾患のある人。 2. 悪性腫瘍のある人。 3. 骨・関節部に感染症がある人。 4. 熱の高い人。 5. 妊娠している人。 6. 適用部位に異常のある人。
	・ 乳幼児には使用しないでください。 ・ 次のような部位には使用しないでください。 1. 心臓部。 2. 内分泌線。 3. 頭部、顔面部（特に眼、耳）。 4. 麻痺部。 5. 阻血組織部。
	・ 当社の修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作をしてけがをすることがあります。

② 各部の名称

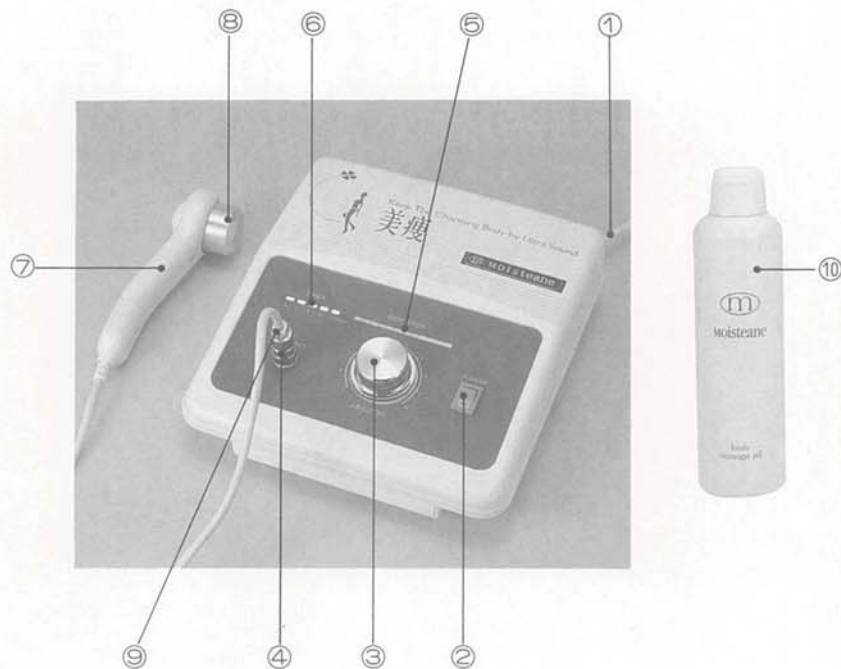

- | | |
|----------|-----------------------|
| ①電源コード | ⑥タイマー表示LED |
| ②電源スイッチ | ⑦ハンドピース |
| ③出力調節つまみ | ⑧ハンドピースヘッド |
| ④出力ジャック | ⑨ハンドピースプラグ |
| ⑤出力表示LED | ⑩ボディマッサージジェル
(別売品) |



③ 機器の準備

機器をご使用になる前に次の確認と準備を行ってください。

- ①電源コードをコンセント（AC100V）に差し込みます。電源コードをコンセントに差し込むときは以下のことに注意してください。
 - ・コンセントがAC100Vであること。
 - ・電源スイッチが「OFF」になっていること。
 - ・出力調整つまみが最小になっていること。

 注 意	
	電源は、交流100V以外は使用しないでください。

- ②マッサージしやすい環境と服装を整えてください。
(バスタオル等を準備されると良いでしょう。)
- ③使用する部位にボディマッサージジェルを十分に塗ってください。

マッサージジェルの特徴

- ◇ハンドピースヘッドから出力される超音波エネルギーを体内に吸収しやすくする効果があります。
- ◇マッサージジェルを塗布し、マッサージすることにより血行を促進し、新陳代謝を高めることができます。更に温熱感を与え発汗を促しスリミング作用が期待されます。
- ◇生薬を中心とした保湿成分が入っているため、うるおいのあるなめらかな肌に整えることができます。

④ 使用方法①

- ①ハンドピースのプラグを本体に差し込んでください。
プラグを差し込まずに電源を入れるとエラーとなりますので、電源投入前に行ってください。



- ②電源スイッチを「ON」にします。
タイマーは自動的に15分がセットされます。



- ③出力調整ツマミを目的に合わせ調節してください。
出力インジケータを確認しながら使用してください。



- ④動作確認
ハンドピースヘッドに水を少量塗布し出力調整ツマミを徐々に上げて、霧化することを確認してください。



④ 使用方法②

ハンドピースの取り扱いについて

マッサージは、ハンドピースヘッドを皮膚に軽く当てて円を描くようにマッサージしてください。

使用中に、ハンドピースヘッドを10秒間停止すると、自動的にブザーが鳴り、超音波の出力が停止します。
停止した場合は、ハンドピースヘッドを、円を描くように動かしてください。再び超音波エネルギーが出力されます。

タイマー表示について

タイマー表示LEDは、15分を5段階で表示します。
電源投入直後は5個すべてが点灯し3分×5個で残り時間が15分であることを示します。使用時間の経過とともにLEDの点灯が減ってゆきます。

更に1分経過毎にブザーが鳴り、LEDの表示状態も変化して正確に残り時間を知ることが出来ます。表示状態による時間の意味は、

点 灯：残り3分
遅い点滅：残り2分
速い点滅：残り1分

となり、LEDの点灯状態により残り時間を知ることが出来ます。

④ 使用方法③

部分使用

①腹部・腰部

時計回りに円を描くように
マッサージしてください。



②大腿部

脚の付け根に向かって円を
描くようにマッサージして
ください。



③ふくらはぎ

円を描くようにマッサージ
してください。



④上腕部

脇に向かって円を描くよう
にマッサージしてください。



⚠ 注意



- 出力をレッドゾーン内で長時間使用しないでください。
- 同じ場所にハンドピースヘッドを停止しないでください。
- 電源を再投入する場合は、必ず電源を切った状態で数秒たってから投入してください。誤動作するおそれがあります。

⑤ ご使用上の注意

⚠ 注意



- 浴室など湿度の高い場所では絶対に使用したり保管したりしないでください。



- 顔面には絶対使用しないでください。
- 使用中に温感が熱く感じられた場合は、すぐに出力を弱くするか又は、使用を中止してください。
- 使用中に皮膚に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 乳幼児には使用しないでください。
- 皮膚近くに骨のある部位では、必ず出力を弱にしてご使用ください。
- ハンドピースを落としたり、強い衝撃を与えると故障の原因になります。
- ご使用後は電源スイッチを切り、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- ハンドピース及びヘッドは、次回の使用に支障の無いよう布など柔らかいもので汚れを拭き取り清潔に保ってください。
- コード類の取り扱いに際しては、コードを持って引き抜くなどして、コードの接続部分に無理な力を掛けないでください。
- 本機器の保管は、高温、高湿の場所をさけてください。
- 本体やハンドピースを絶対に水洗いしないでください。

◇ご使用後は、ボディマッサージジェルを洗い流してください。

⑥ 使用後の保管要領

- ①使用した後は、電源スイッチを切ってからコンセントを抜いてください。
- ②ハンドピースのプラグを本体から抜いて、ハンドピースヘッドやコードについたジェルを次の使用に支障のないように拭き取って清潔にしてください。
- ③本体とハンドピースを専用ケースに入れて保管してください。



注 意



- ・電源コードをコンセントから抜くときは、コードを持って引いたりせず必ずプラグの部分を持って引き抜いてください。
- 感電やショートして引火することがあります。
- ・ハンドピースを本体から抜くときは、コードを持って引いたりせず必ずハンドピースプラグの部分を持って引き抜いてください。
- ・本体やハンドピースを絶対水洗いしないでください。

こんな場合は故障ではありません

- ①10秒ほどで超音波の出力が停止してしまう。
マッサージをせずに放置していたり、同じ場所からハンドピースヘッドを動かさない場合は安全のため超音波の発振は停止します。ハンドピースヘッドを動かすと、発振は再開されます。
- ②マッサージを10秒ほどでしていたが超音波の出力が停止してしまう。
マッサージは大きな円を描くように行ってください。ハンドピースヘッドの移動が少ない場合も停止する場合があります。ハンドピースヘッドを動かすと、発振は再開されます。
- ③電源を入れた状態で放置していたら、ハンドピースヘッドを動かしても出力が再開されない。
出力が停止した状態で、連続10分経過した場合タイムアウトエラーとなり、そのままでは使用できません。電源を「OFF」にしてから、再度機器の準備からやり直してください。
- ④使用中にハンドピースが本体からはずれた後、再び本体に差し込んだが、正常な状態に戻らない。
ハンドピースが本体から抜けた場合、電源を「OFF」にして、再度機器の準備からやり直してください。
- ⑤ハンドピースを本体に接続せずに電源スイッチを「ON」にし、その後本体に差し込んだが正常な状態に戻らない。
電源を「OFF」にして、再度機器の準備からやり直してください。

アフターサービス

- 商品について使用方法が分からなかったり、故障と思われるときや、不安に思うことなど、疑問が生じたらもう一度取扱説明書の必要箇所を読むことをおすすめします。それでも疑問や不安が残った場合は、お客様相談係へお電話をかけてください！お客様相談室が疑問にお答えします。

受付時間 am9:00~pm5:30月~金（祝祭日を除く）
東京 03-3464-6655(代) お客様相談室

- 修理や点検のご要望は、サービス係がお受けします。修理や点検の際には、必ず以下の内容を記入した手紙を同封して下記へ宅配便等で必ずこわれ物扱いとしてお送りください。
 - ①修理か点検のどちらが希望か
 - ②修理の場合、機器の状態
 - ③お客様のお名前・住所・電話番号
 - ④修理・点検の費用が高額となる場合、あらかじめ連絡が必要かどうか

株式会社ホームイオン研究所・サービス係
〒150東京都渋谷区神泉町17-2
電話 03-3464-6655(代)

保証規定

- 機器本体の保証期間は「お買上後一年間」です。
- ご使用中万一故障が発生した場合は、お買上店または製造元へ製品に本証を添えて修理をご依頼ください。
- 下記の場合は保証期間内でも有償修理となりますのでご注意ください。
 - イ) 取り扱いの過誤により発生した故障。
 - ロ) 製品を改造したり、不当な修理により発生した故障。
 - ハ) 火災、地震、水害等天災地変の不可抗力による故障及び損害。
 - ニ) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - ホ) 保証書のご提示がない場合。
- 本規定は日本国内での使用に対して規定するものです。
- 本規定によりお客様の権利を拘束するものではありません。
- 修理などで生じた送料などの諸経費は、保証期間内であってもお客様のご負担となります。



株式会社 ホームイオン研究所



お買上日 平成 年 月 日

取扱店名