

Super Sonic Hair Eliminator
SS-III MODEL-HE2000

取扱説明書

超音波脱毛器

Charm Echo

※ご購入後は必ず本取扱説明書をお読みください。

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また、注意事項は危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中の近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

★安全上のご注意

1	ご使用になる前に	2
2	はじめに	3
3	チャームエコーの特徴	3
4	機器各部の名称	4
5	機器の準備	5
6	脱毛する前に	5
7	正しい使い方	6
8	脇毛の脱毛	8
9	ビキニラインの脱毛	9
10	スネ毛の脱毛	10
11	眉毛の脱毛	11
12	ご使用上の注意	12
13	保管要領&アフターサービス	13
14	保証書について	14

1 ご使用になる前に

注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・次のような症状のある人は本器を使用しないでください。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 急性疾患のある人。 2. 皮膚に異常のある人。 ・乳幼児には使用しないでください。皮膚を傷つけることがあります。
警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・浴室など湿度の高い場所では、使用しないでください。

このたびは超音波脱毛器「チャームエコー」をお買い上げいただきましてありがとうございます。

超音波脱毛器は、超音波の素晴らしい特性を、はじめて脱毛に応用した新製品です。

本器の特性を十分に活かして無理なく脱毛して頂くためにこの取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

ご使用中にわからないことや具合の悪いことが起きたとき、きっとお役にたちます。

3 チャームエコーの特長

●超音波脱毛器とは

超音波とは20 [KHz] (1秒間に20,000回)以上の振動数で、人には聞こえない高い周波数の音をいいます。


この超音波は、工業用では探傷器・加湿器・洗浄機等に活用されたり、医療の分野に応用されております。

超音波脱毛器は、毛根の固着力を弱め、脱毛時の滑りをよくするなど脱毛に必要な超音波の特性を活かし、60 [KHz] (1秒間に60,000回)の振動を発生する、日本で唯一の方法特許を取得した製品です。


(特許第1988530号)

●超音波脱毛器の特長

- ①超音波振動は摩擦を減らし滑りよくするのでスムーズに脱毛できます。
- ②超音波脱毛器は微細振動ですのでお肌を痛めません。安心して脱毛できます。
- ③ピックの先端は超音波振動子の振動を効率よく伝えるジュラルミン製です。
- ④ピックの先端部が超音波振動しますから、毛根まで効率よく超音波エネルギーを伝え、毛根の固着力を弱め、太い毛も摩擦抵抗を減らす等無理なく脱毛します。

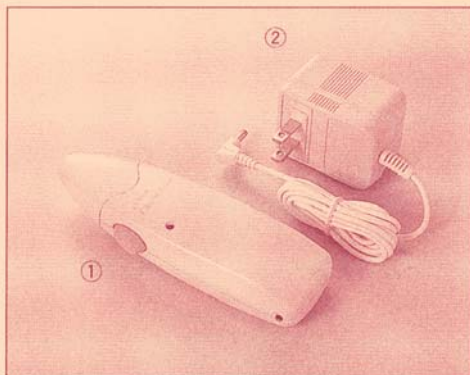

- ①機器本体 ②ACアダプター ③ピックレバー
④電源ランプ ⑤ピック ⑥ピックキャップ
⑦ACアダプタープラグ

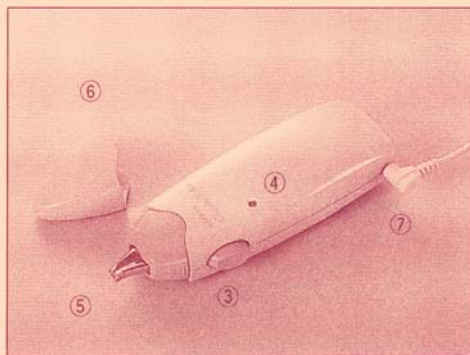

5 機器の準備

- ①超音波脱毛器専用ACアダプターを家庭用(交流100V)のコンセントに差し込んでください。
- ②超音波脱毛器専用ACアダプターの出力プラグをACアダプタージャックに差し込んでください。この時パイロットランプが点灯します。

⚠ 警告



・交流100V以外は使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

- ③ピックレバーを押すとピック先端に超音波が伝わります。

6 脱毛する前に

まず脱毛する部分を清潔にすることが大切です。そのためには脱毛前に入浴することをおすすめします。入浴は脱毛部分を清潔に保つだけでなく、毛穴を開かせ毛根からの脱毛を容易にします。もし入浴しない場合は蒸しタオルで脱毛部分を温めるとより効果的です。


⚠ 注意



・ピック先端で皮膚を挟まないようにしてください。皮膚を傷つけることがあります。
・一度に広い部分を脱毛することはおやめください。皮膚が炎症を起こすことがあります。部位によっては、数カ所に分けて徐々に脱毛してください。
・脇はタルミが多くピック先端を皮膚に付けると皮膚をはさみやすいので注意してください。


7 正しい使い方

- ①ピックレバーを押して毛をつまむ。
ピックレバーを押すと同時に、超音波エネルギーがピック先端に集中するようになっていきます。

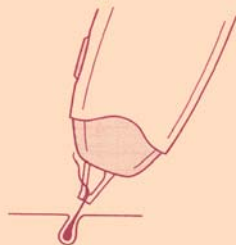


強くつまみすぎないように
気をつけてください。

- ②超音波振動が伝わる。
超音波振動は伝わりやすい方向と伝わりにくい方向がありますので、ピックで毛を挟み図のように毛の生えている方向に引いてください。

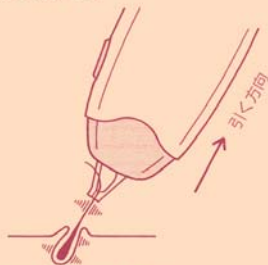

毛がピンと張る程度に、
軽く引いてください。

- ③皮膚が持ち上がる程度に軽く引いたまま数秒待ってください。このとき、毛がピンと張っていませんと毛根に超音波振動が伝わりにくくなりますので注意してください。

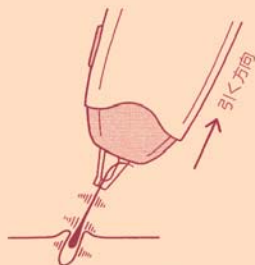


皮膚が少し持ち上がる程度に軽く引いて数秒待ってください。


- ④毛をピンと張ったまま数秒たちましたら、更に軽く引いて抜いてください。毛根から脱毛できます。




持ち上がった皮膚が自然に戻る感じで毛根から抜けます。

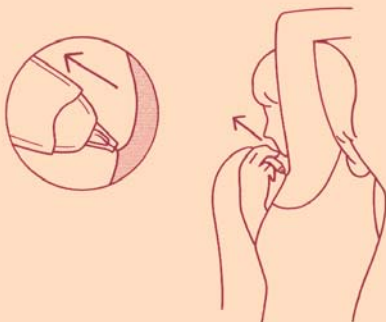

- ①軽く引くと皮膚が持ち上がりますが、脇はタルミが多く振動が吸収されやすいので、なるべく皮膚が張るように腕を上げてください。
- ②皮膚を挟まないよう注意して皮膚から2～3mm位のところを挟んで、軽く引いてください。(脇の下が見えにくい時は、鏡を使って1本づつ挟んでください)
- ③そのまま10～15秒たちますと持ち上がった皮膚が自然にもとに戻る感じで脇毛が抜けてきます。

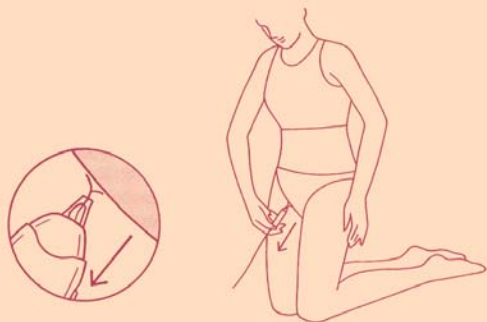

- ① 予めビキニライン等の脱毛する範囲は決めておきましょう。
- ② 皮膚にピック先端が軽く触れてからピックレバーを押して毛を挟み、軽く引いてください。
- ③ 軽く引くと皮膚が持ち上がりますので、そのまま10～15秒すると持ち上がった皮膚が自然に戻る感じで毛が抜けてきます。
- ④ 15～20秒たっても抜けてこない場合は、持ち上げたまま毛根に近い部分をそっと指で押してください。超音波振動がより強く伝わり毛が抜けてきます。

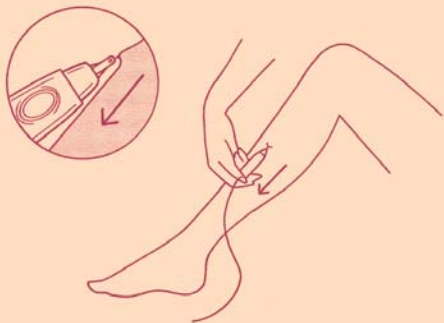


- ① 皮膚にピック先端が軽く触れてからピックレバーを押して毛を挟み、毛の生えている方向に軽く引いてください。
- ② 軽く引くと皮膚が持ち上がりますので、そのまま5～6秒すると持ち上がった皮膚が自然に戻る感じで毛が抜けてきます。
- ③ 10～15秒たっても抜けてこない場合は、持ち上げたまま毛根に近い部分をそっと指で押してください。超音波振動がより強く伝わり毛が抜けてきます。

⚠ 注意



・ピック先端で皮膚を挟まないようにしてください。皮膚を傷つけることがあります。

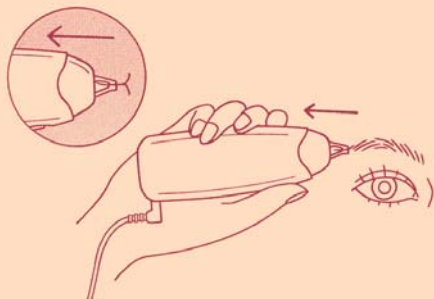

- ①図のように本体を持ち、ピック先端が軽く皮膚に触れてからピックレバーを押して毛を挟んでください。
②矢印の方向に引くと眉毛が抜けます。

⚠ 注意	
⊘	<ul style="list-style-type: none"> 浴室など湿度の高い場所では、使用しないでください。
⊘	<ul style="list-style-type: none"> 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作をしてけがをすることがあります。 脱毛直後は入浴しないでください。皮膚が雑菌により炎症を起こすことがあります。 ムダ毛の脱毛以外の目的には使用しないでください。 眉毛の脱毛以外の顔面には、使用しないでください。 乳幼児には使用しないでください。
⊘	<ul style="list-style-type: none"> 使用時以外は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。けがや火傷、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

脱毛後の発毛

一度脱毛した部分から再び発毛してくる場合がありますが、二度目の超音波による脱毛は、初回に比べより短い時間で簡単に脱毛することができます。

⚠ 注意



- ピック先端を皮膚に押し付けしないでください。皮膚を傷つけることがあります。
- 眉毛以外の顔には絶対に使用しないでください。

13 保管要領&アフターサービス

●保管要領

- ①ご使用後はACアダプターをコンセントから必ず抜いてください。
- ②ピックの先端は、次回の使用に支障のないように汚れを拭き取るなどして清潔に保ってください。
- ③本器は絶対に水洗いしないでください。

⚠ 注意



・ACアダプターをコンセントから抜くときは、出力コードを持たずに必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



・ACアダプターの出力コードをグルグル巻きにして傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。出力コードが破損し、火災、感電の原因となります。

●アフターサービス

商品のご使用方法がわからない場合や、修理を希望される場合は、お客様相談係へお電話をください。
株式会社ホームページ
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町17-2
営業時間：9:00AM～5:30PM 月～金（祝祭日を除く）

03-3464-6655

保証書

1. 機器本体の保証期間は、「お買い上げ後1年間」です。
2. ご使用中万一故障が発生した場合は、お買い上げ店または製造元へ、製品に本証をそえて修理をご依頼ください。
3. 下記の場合は、保証期間中でも有償になりますのでご注意ください。
 - イ) ご使用中で取り扱いの過誤により発生した故障。
 - ロ) 製品を改造したり、不当な修理により発生した故障。
 - ハ) 火災・地震・水害等天災地変などの不可抗力による故障及び損傷。
 - ニ) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - ホ) 保証書のご提示がない場合。
4. 本規定によりお客様の権利を制限するものではありません。
5. 修理などで生じた送料などの経費は、保証期間内であってもお客様の負担となります。
6. 本規定は日本国内でのご使用に対して規定するものです。(This warranty is valid only in Japan)

株式会社ホームページ **研究所**
東京都渋谷区神泉町17番2号

お買い上げ日 平成 年 月 日
販売店

お客様	お名前	ふりがな	TEL
	ご住所	〒	

■チャームエコー仕様

電 源 : DC9 [V] (ACアダプター)

消費電流 : 300 [mA]

発振周波数 : 60 [KHz]

振 動 子 : 圧電セラミック

寸 法 : 143×46×30 [mm]

アダプターコード : 2000 [mm]

本体重量 : 80 [g]

特 許 : 第1988530号

 株式会社 **ホームイオン研究所**

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町17-2

電話 : 03-3464-6655

営業所 : 大阪・九州