

■スキンコンディショナー

 **moisteane**
●モイスティーナ

●モイスティーナ仕様

電 源：直流12V(ACアダプター)

消費電流：230mA

パルス出力：L(低)、M(中)、H(高)

温度調整：L(約33℃)、M(約35℃)、H(約38℃)

本体重量：370g

本体寸法：200×110×35mm

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。



株式会社 **ホーマイオン研究所**

東京都渋谷区神泉町17-2 ☎03(3464)6655代



Skin Conditioner
 **moisteane**

●モイスティーナ
取扱説明書

ご購入後は必ず本取扱説明書をお読みください。



HOMER ION LABORATORY CO.,LTD.

①ご使用の前に

モイスティーヌをお買い上げいただきましてありがとうございます。
本品は超小型コンピュータ制御の温熱付きスキンコンディショナーです。
市販のコットンセット、化粧水や美容液、ミネラルウォーター等をつけてお使いください。
各種有効成分を深く肌に浸透させ、若々しく美しい素肌づくりのお手伝いをします。1秒間1200回の無刺激マイクロマッサージで充分ご満足いただけます。
末ながくご愛用賜りますようお願い申し上げます。

目次

①ご使用の前に	2
②安全上のご注意	3
③標準セット内容	4
④ご準備&ご使用方法	5・6
⑤パフ部コットン交換方法	7
⑥器機各部名称	8・9
⑦標準的なご使用法	10・11
⑧深部洗顔&イオン導入(フェイス・マッサージ)	12
⑨参考資料(皮膚の構造模式図)	13
⑩保証規定	14
⑪アフターサービス	15

②安全上のご注意




ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じる恐れのある内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意：人が損害を負う可能性及び物質的損害のみの発生が想定される内容。

 注意	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(式図の場合は一般注意)が描かれています。
 注意	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
 注意	⊕記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになった後、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

③標準セット内容

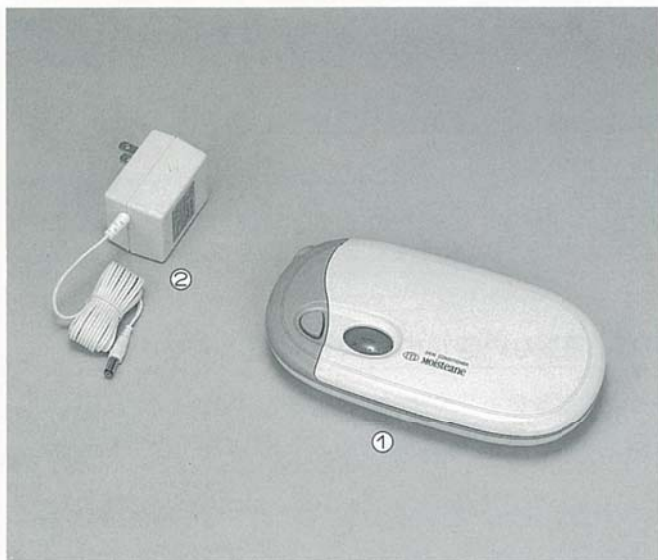

①Moisteane器械本体
②ACアダプター

Ⓜ Moisteaneの化粧品シリーズ▶
スキンケアコンディショナーと併用される
時は、化粧品を厳選してください。
イオン導入時は香料や色素、防腐剤な
ど特に注意が必要です。Moisteane
の化粧品シリーズは姉妹品として最善
の対策がとられております。



④ご準備&ご使用方法

●ご準備

1. Moisteane器械本体をお取り出しください。
2. 専用のACアダプターをご準備ください。
3. 本器の他に、化粧コットン、化粧水又は美容液をご準備ください。

●ご使用方法

1. ACアダプターをコンセントに差込み、アダプターのプラグを器械本体と接続します。
2. POWERスイッチを押すと、赤いランプ(電源ランプ)が点灯します。
④電源ランプが点灯しないときはACアダプターのコンセントへの差込及び器械本体との接続を再度お確かめください。
3. 器械本体のオープナーボタンを押すと蓋が浮き上がります。
4. 手で蓋を押し開けパフ部を取り出します。
5. パフ部コットンを化粧水又は美容液、水等で良く濡らしてください。
④化粧水や美容液が少なすぎる時はピリピリ感が出たり、マッサージされないことがあります。




4 ご準備&ご使用方法



6. マッサージの準備が整うとOKランプ(緑)が点灯します。




7. マッサージを開始します。1カ所2~3秒で軽くすべらす要領でお顔全体を(3~10分)マッサージします。OKのランプが点滅してお知らせします。

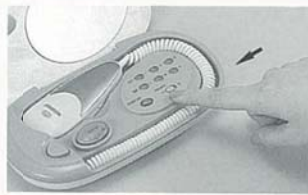

④1) フェイスマッサージの時は出力を L にします。首や胸等は M、手や肘・膝は H を選定します。

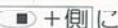2) 通常のマッサージはPOLARITYスイッチを  側に
深部洗顔を目的としたマッサージはスイッチを  側にします。

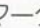

8. ご使用後はパフ部コットンを新品と交換の上  マーク及びステンレス電極部を必ず上にして収納してください。




9. 蓋を閉じPOWERスイッチの横を押すと“カチッ”と音がしてロックされます。



注意

- 本器の使用中に頭痛を感じたり、異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- パフ部を同一場所に5秒以上当てておくと肌質によって炎症を起こす恐れがあります。


5 パフ部コットン交換方法

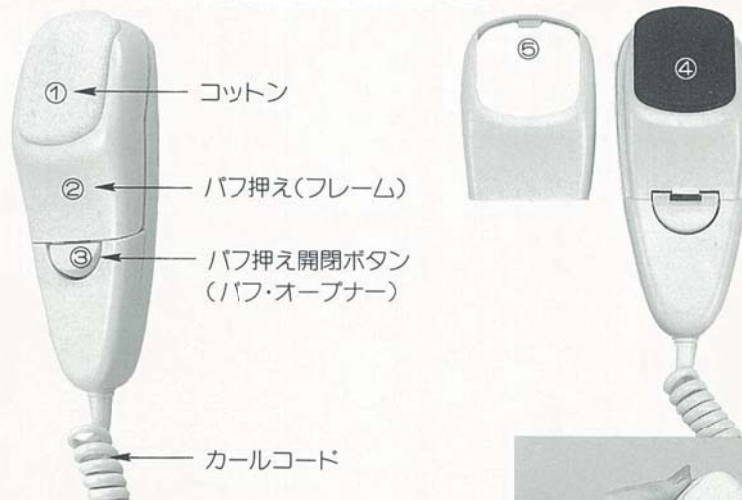

1. パフ押さえ開閉ボタン③を押すとパチッと音がしてパフ押さえ②が外れます。



2. 新しいコットンをゴム電極④にのせます。
3. パフ押さえ②の先端にあるツメ⑤をパフ本体先端の穴にはめます。

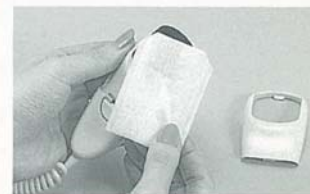

4. パフ部先端がズレないように指で押さえパフ押さえ②の下部をパチッと音がするまで押さえます。



6 器機各部名称




- 商品ナンバー
- | | | | |
|---|-----------|---|-------------|
| 1 | クレンジングセラム | 2 | ヒドラソープ |
| 3 | ティープセラム | 4 | バランシングローション |
| 5 | リバイタルセラム | 6 | ホワイトセラム |
| 7 | アクノセラム | 8 | ファームینگセラム |

標準的なご使用方法

美膚いきいきMoisteane

ライフ▶標準的な使用方法

夜のコース

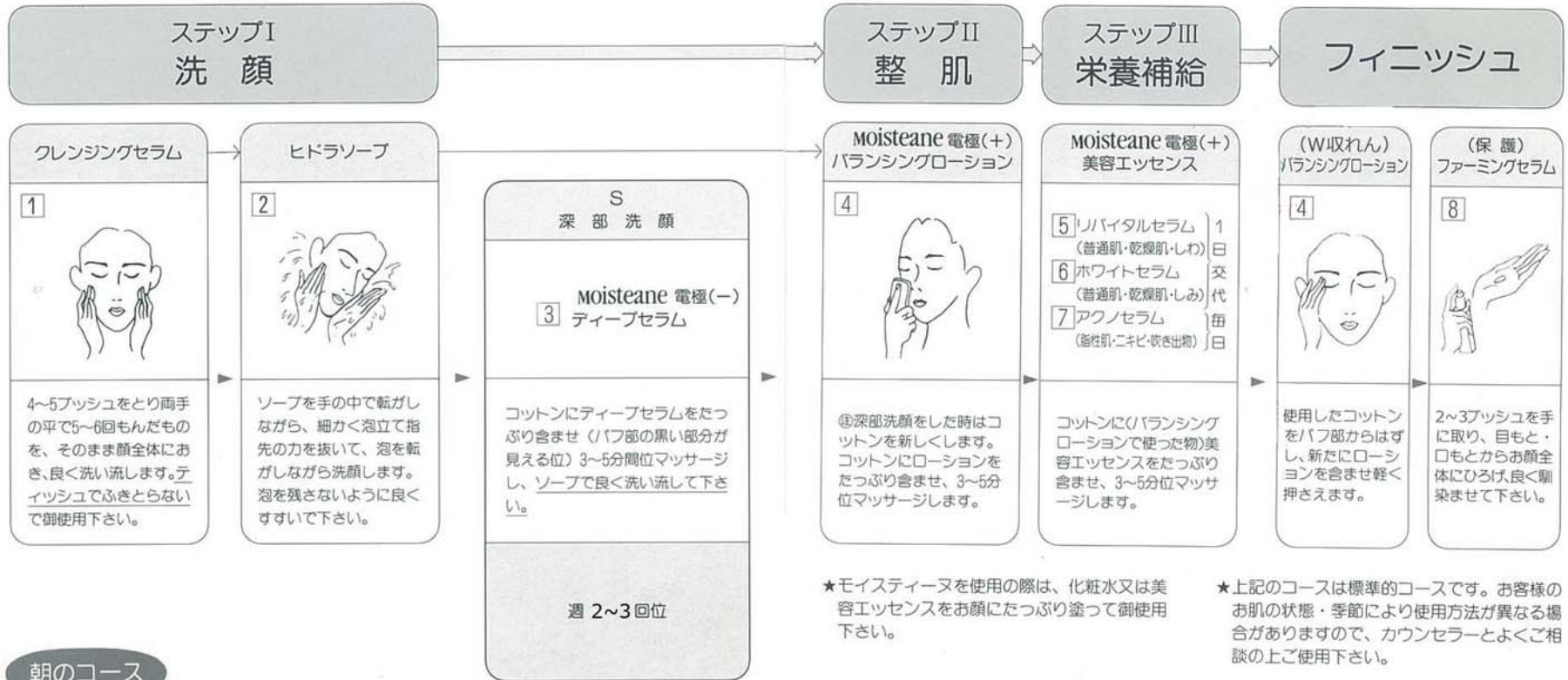

★Moisteaneを使用の際は、化粧水又は美容エッセンスをお顔にたっぷり塗って御使用下さい。

★上記のコースは標準的なコースです。お客様のお肌の状態・季節により使用方法が異なる場合がありますので、カウンセラーとよくご相談の上ご使用下さい。

朝のコース



化粧部位の皮膚に異常のある方は使用しないでください。

⑧ 深部洗顔&イオン導入(フェイス・マッサージ)



— バフ部
フィンガー電極

ティブセラム

バランスグローション

● 深部洗顔

▶ フレンジングとソープでW洗顔の後に行います。
深部洗顔用美容液ティブ・セラムを塗布し、コットンにも十分含ませた上、極性切替スイッチを⊖側にして3分~5分マッサージします。
お顔のクスマガとれ、透明感のあるお肌になります。

● イオン導入


▶ 化粧水又は美容液をお顔にタツプリ塗布した上、コットンにも十分含ませます。極性切替スイッチを⊕側にして3分~5分マッサージします。
保湿成分がお肌に深く浸透して、張りのあるみずみずしいお肌になります。



注意

水・化粧水・マッサージローション・美容液以外は、ご使用にならないでください。皮膚に異常を生じる場合があります。

⑨ 参考資料(皮膚の構造模式図)

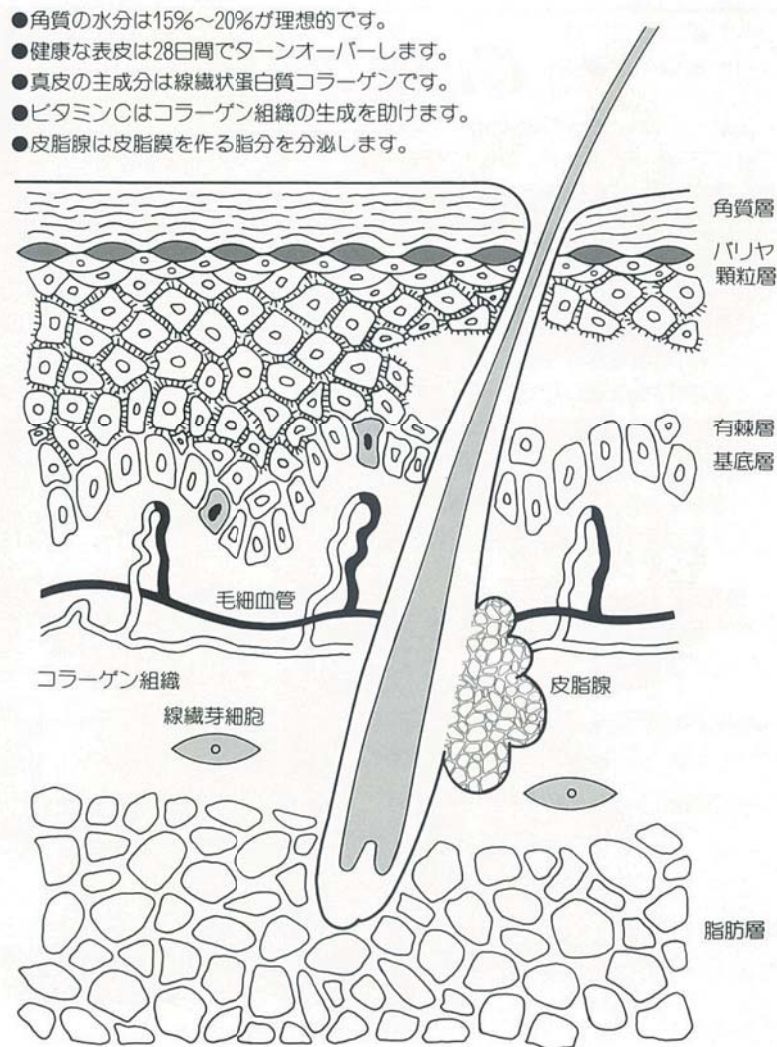

10保証規定

Guaranty

保証規定

- (1) 機器本体の有効保証期間は、「お買い上げ後2年間」です。
- (2) ご使用中万一、故障が発生した場合は、本証に現品をそえて、お買い上げ店または製造元へ修理をご依頼ください。
- (3) 下記の場合は、保証期間中でも有償になりますのでご注意ください。
- ㊦ ご使用上で取り扱いの過誤により発生した故障。
 - 製品を改造したり、不当な修理により発生した故障。
 - ㊦ 火災・地震・水害等天災地変などの不可抗力による故障及び損傷。
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - ㊦ 保証書のご提示がない場合。
 - ㊦ 日本国内でのご使用に限ります。

製造元









株式会社 ホーマイオン研究所



ご購入日 平成 年 月 日

取扱店名

11アフターサービス

 注意	<p>・ACアダプターを抜くときは、出力コードを持たずに必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。</p>
 注意	<p>・使用時以外は、電源スイッチを切りACアダプターをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になることがあります。</p>
 注意	<p>・ACアダプターの出力コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。出力コードが破損し、火災・感電の原因となる恐れがあります。</p> <p>・ACアダプターを保管する場合</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1180 662 1373 827">  <p>出力コードは図のように軽く束ねてください。</p> </div> <div data-bbox="1595 690 1750 827">  <p>出力コードを直接本体に巻き付けないでください。</p> </div> </div>
 警告	<p>・修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理、改造は行わないでください。発火、異常動作、感電事故のもとになることがあります。</p>

- 修理の場合は ㈱ホーマイオン研究所 西東京工場へ
東京都日野市万願寺12
☎0425(84)5132
- ご使用方法が解らない時は ☎03(3464)6655
- 美容相談の時は ㈱ホーマイオン研究所
又は最寄りの販売会社・ビューティーアドバイザーまで