

excellent  
skin conditioner

 moisteane

 Beau

*Puff*

取扱説明書

 株式会社 **ホーマイオン研究所**

東京都渋谷区神泉町17-2

electrical face massage  
and permeation of skin  
essence for beauty ---

※ご購入後は必ず本取扱説明書をお読みください。

## はじめに

この度は **moistane Beau Puff** をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本器はマイクロコンピュータでコントロールされた電子美容パフです。

1秒間に2400回の無刺激マッサージで、血行を良くすると同時に、お肌の深部の汚れを取り除いたり、化粧水や美容液の各種成分を深くお肌に浸透させる機能を持っています。

毎日のお手入れにご使用になることで、透明感のあるみずみずしい素肌に整えます。

## 目次

1	ご使用になる前に	3
2	各部の名称	4
3	ご使用方法	5
4	タイマー機能	7
5	保管要領	7
6	電池の交換	8
7	アフターサービス	9
8	本体仕様	9
9	保証規定	10

## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。




ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。

**いずれも安全に関する重要な内容なので、必ず守ってください。**



**警告：**この表示を無視して、誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容。

**注意：**この表示を無視して、誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性及び物質的損害のみの発生が想定される内容。

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●の記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

**※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。**

## 注意

	・化粧部位の皮膚に異常のある方は使用しないでください。 ・本器は、使用目的以外にご使用にならないでください。 ・電池は幼児の手の届かない所に置いてください。 ・万一、お子様が電池を飲み込んだ場合は直ちに医師と相談してください。（ボタン電池CR2032）
	・修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理、改造は行わないでください。 ケガや異常動作のもとになることがあります。

## 1.ご使用になる前に

⑩moisteane Beau Puff は、無刺激マッサージでお肌の活性化をはかると同時に汚れを取り除きコンディションを整える「**MASSAGE**」モードと化粧水や美容液の有効成分を肌に浸透させる「**TREATMENT**」モードの2つの機能を備えています。化粧水や美容液等をつけ、使用目的に合わせてご使用ください。

### ..... 化粧品の選び方 .....



⑩moisteane Beau Puff はマッサージと同時に化粧水や美容液の配合成分を積極的にお肌の深部にまで浸透させる機能を持っています。ご使用になる化粧品は合成色素・香料・油分が配合されていないものをお選びください。

⑩moisteane シリーズ、Beauシリーズの化粧品は、Beau Puffの特長に合わせた最適の化粧品を取り揃えています。ぜひお試しください。

### ⑩moisteane シリーズ・Beauシリーズ




## 2.各部の名称

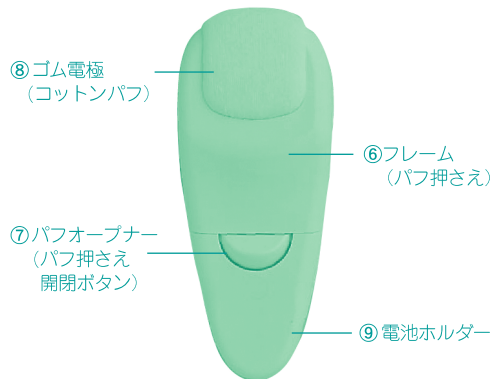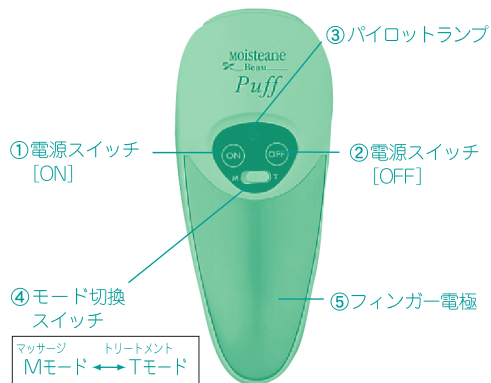


### 3.ご使用方法

#### 1 コットンパフをセットします。


パフ押さえ開閉ボタン⑦を押すと、パチッと音がして、パフ押さえ⑥が外れます。

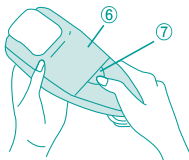

図のようにゴム電極⑧に新しいコットンパフをセットします。ゴム電極⑧部分がキチンと隠れるようにのせてください。

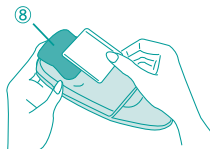

コットンパフをセットした後、パフ押さえ⑥の先端を凹部に合わせ、パフ押さえ⑥の下部をパチッと音がするまで矢印方向に押さえます。

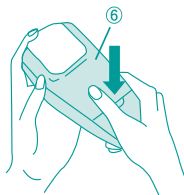

セットしたコットンパフ全面に化粧水または美容液をしみ込ませてください。

#### ⚠ 注意



- ・ フレームをキチンとセットしてください。フレームが外れケガをする場合があります。
- ・ 化粧水や美容液以外は、ご使用にならないでください。皮膚に異常を生じる場合があります。

#### 2 電源を入れます。

電源スイッチ[ON] ①を押しパイロットランプ③の点灯をお確かめください。

#### 3 モードを切替えます。


ご使用の目的に合わせてモード切換えスイッチ④を使用目的にあわせて切換えます。

MASSAGEモード … 肌深部の汚れを取り除き、  
コンディションを整える  
TREATMENTモード … 肌に成分を浸透させる

#### 4 お手入れを始めます。

指または手のひらをフィンガー電極⑤に、しっかりと触れて持ちます。

※しっかりと触れていないと通電されないことがあります。

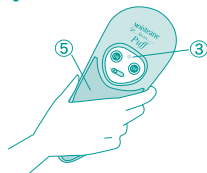

化粧水または美容液をしみ込ませたパフ面をお手入れしたい箇所にあてます。

パイロットランプ③が点滅し正常に通電されている事をお知らせします。

コットンパフには化粧水または美容液がケースの周辺へこぼれ出ない程度に適量を良くしみ込ませてください。少ないと、ピリピリ感を感じたりマッサージされないことがあります。

## 4. タイマー機能

1. 電源スイッチを入れ**2分間使用せず放置すると自動的に電源が切れ**電池の消耗を防ぎます。
2. 積算タイマーにより、通電中（パイロットランプ点滅時）30秒毎にブザーが鳴り時間経過をお知らせします。  
**実通電時間（パイロットランプ点滅時間）が5分経つと自動的に終了**します。  
続けてご使用の場合には電源を再度入れてください。

## 5. 保管要領

- 化粧水等がケース周辺にこぼれ出た場合は使用後に電池ホルダーから電池を取出し、乾いた布等で水気を拭き取り良く乾燥させてください。  
電池ホルダー内が濡れている時は、拭き取った後ホルダーを開放した状態で乾燥させてください。  
（参照：8ページ 電池の取り外し方）
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。  
（参照：8ページ 電池の取り外し方）
- 故障の原因になりますので機器本体を水につけたり、水洗いは絶対にしないでください。


### ⚠ 注意



・本器の使用中に頭痛を感じたり、皮膚にかぶれを生じたり、身体に異常を感じたりした場合は、使用を直ちに中止してください。

## 6. 電池の交換

1. 電源スイッチ[OFF]②を押し、電源を切った後、パフ部を上にして電池ホルダー⑨の指掛けを時計まわりに回転させ、ホルダーを開いて電池を取り出します。
2. 新しい電池を、プラスが上になるよう2枚とも同じ方向に重ねて収納し、ホルダーを閉じます。  
注意：指定（CR2032）された電池以外のご使用になれません。（1日5分で約3ヶ月間使用可）
3. 電源スイッチ[ON]①を押し、パイロットランプ③が点灯すれば完了です。

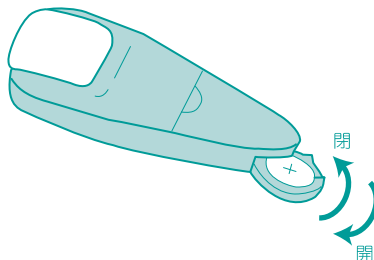

### ⚠ 注意



・電池は幼児の手の届かない所に置いてください。  
万一、お子様が電池を飲み込んだ場合は直ちに医師と相談してください。（ボタン電池CR2032）

## 7.アフターサービス

- 商品の修理及び、ご使用方法のお問い合わせは、株式会社 ホーマーイオン研究所 お客様相談室へ  
営業時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）  
午前9時30分～午後5時30分  
電話：03-3770-0808
- 美容相談は、販売会社・ビューティーアドバイザーまたは、株式会社ホーマーイオン研究所『美容部』へ

## 8.本体仕様

電源：DC6 [V] (電池CR2032×2)  
消費電流：11 [mA]  
出力周波数：2400 [Hz]  
パルス出力：6 [Vp]  
タイマー：5 [分]  
寸法：130×55×33 [mm]  
質量：82 [g] (含電池)

### ⚠ 注意



・修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理、改造は行わないでください。  
ケガや異常動作のもとになることがあります。

- 品質改良のため予告なく一部変更することがあります。

## 9.保証規定

### 保証規定

1. 機器本体の保証期間は、「お買い上げ後1年間」です。
2. ご使用中万一故障が発生した場合は、お買い上げ店または製造元へ、製品に本証を添えて修理をご依頼ください。
3. 下記の場合は、保証期間中でも有償になりますのでご注意ください。
  - イ) 取り扱いの過誤により発生した故障。
  - ロ) 製品を改造したり、不当な修理により発生した故障。
  - ハ) 火災・地震・水害等天災地変などの不可抗力による故障及び損害。
  - ニ) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
  - ホ) 保証書のご提示がない場合。
4. 本規定によりお客様の権利を制限するものではありません。
5. 修理などで生じた送料などの経費は、保証期間内であってもお客様の負担となります。
6. 本規定は日本国内でのご使用に対して規定するものです。

 株式会社 **ホーマーイオン** 研究所  
東京都渋谷区神泉町17番2号

お買い上げ日 平成 年 月 日  
販売店

お客様	お名前	ふりがな	TEL
	ご住所	〒	

excellent  
skin conditioner

 moisteane  
Beau  
*Puff*

取扱説明書

electrical face massage  
and permeation of skin  
essence for beauty ---

※ご購入後は必ず本取扱説明書をお読みください。