

# ホーマイオン HL-III

TRANSCUTANEOUS  
ELECTRICAL  
NERVE  
STIMULATOR




## ワンタッチ自動治療 ～スタンダードな万能機種～

人間は直立歩行の構造上、体重の負担がかかり易い部位はおおよそ決まっています。上から順に肩(首)・腰・脚(膝関節等)がその代表的な部位となります。また、負担がかかるという事はそれだけ痛めている方の割合も多いといえます。

HL-IIIはこの代表的な3つの部位に対応した治療プログラムと脊髄(全身治療)専門の治療プログラムを合わせることによって、様々な症状もワンボタンで簡単に治療できます。持病の痛み等がありマッサージ器では物足りないお客様にもきっとご満足いただけるはずですよ。

### 肩・首 (10分)

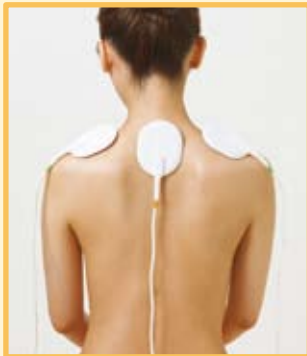

たたく



もむ

筋肉の硬直を防ぎ、たたきながら揉みほぐします

### 腕・脚 (10分)




もむ



鎮痛

揉みほぐしながら、痛みを抑えます。

### 脊髄通電 (15分)

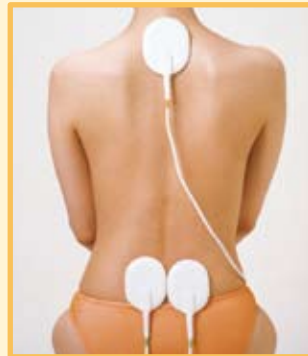

血行



疲労回復

全身の血行を良くし、疲労を癒します。

### 腰 (15分)



もむ



ローリング


左右のバランスを整えながら腰を集中治療。

この他、お好みの刺激でマッサージが行える「自由選択モード」、上位機種には不可欠な「温熱ヒーター」を標準装備。

この治療法は「全て異なる周波数の組み合わせ」から成り立っています。「周波数」とは1秒間に伝わる刺激の波の数をいい、この数の大小によって出せる効果の内容も変わってきます。この特性を熟知した上で、より効果が上がるように周波数を様々な組み合わせたものが「治療のプログラム」となります。

# 特殊な波形で最大限の心地よさ


## 一般の波形

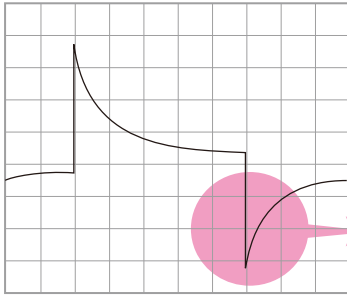

電気の跳ね返りがある

直角波のため通電時、皮膚に鋭い刺激と痛みが走る。

## ホーマーイオンの波形

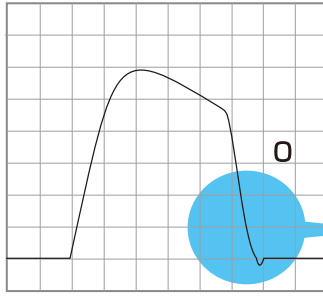

電気の跳ね返りがない

なだらかな角のない波形で通電時の刺激のあたりもソフト。気持ちよさが残る。

人の皮膚は、本来電気を通しにくい性質のため、通電時の電気抵抗で、チクタク・ピリピリと感じてしまいます。

ホーマーイオンは、この電気抵抗を抑え、マイルドな通電が行える波形を採用。これにより皮膚に痛みを感じずに、深部まで電気治療を施すことが可能になりました。

## ご愛用者の声

- 「ひざの痛みが楽になり、歩行もスムーズになりました。」 千葉県我孫子市 67歳男性
- 「ひどい肩こりでしたが、体験で通っている間に楽になりました。夜も気持ちよく眠れます。」 愛知県安城市 52歳女性
- 「足・腰のふらつきがなく安定感がでてきたように感じる。立ち仕事で足がパンパンにはれていて足首もこわばっていたが、柔らかくなり軽くなった。腰の痛みも楽になった。」 福岡県久留米市 60歳女性
- 「都合で医者に通えないときは、自宅で使っています。おかげで楽ができます。」 愛知県豊橋市 71歳男性
- 「肩こりや腰の痛みが楽になって嬉しい」 奈良県奈良市 55歳女性

※効果には個人差があります。

安心

2年間保証

お得

電気代1ヶ月13円

仕様

### 承認番号

医療機器承認番号 20700BZZ01159  
低周波治療器 [管理医療機器]

### 電氣的仕様

定格電源電圧：～100 [V] (50/60Hz)  
定格消費電力：23 [W]  
治療周波数：ポイント治療メニュー (1～1000Hz)  
治療コースメニュー (3～100Hz)  
バランス調整：左右出力差±30%  
タイマー：最長15分 (1分毎に設定)  
温熱導子設定：最高43℃ (無段階調整)

### 本体仕様

寸法：幅378×奥行280×高さ178(mm)  
重量：本体3.9(Kg)  
付属品：温熱導子 3個 (大1、小2)  
ベルト3本 (大1、小2)  
入力ヒューズ 1個  
導子ベルトコネクター 3個  
導子コードキーパー 2個  
本体ビニールカバー 1枚

## 危険



・下記のような医用電気機器との併用は、誤動作を招く恐れがありますので使用しないでください。  
ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器、心電計などの装着形の医用電気機器

社団法人 日本ホームヘルス機器協会



株式会社 **ホーマーイオン研究所**

東京都渋谷区神泉町17-2

お客様相談室フリーダイヤル

☎ **0120-0842-39**

オハヨーニサンキュウ



ISO9001  
JQA-QMA10316



ISO13485  
JQA-MD0002