



パルスケア



専用カート

SPECIFICATION

【商品名】	パルスケア
【品番】	GMS-01
【寸法】	幅328×奥行180×高さ76[mm]〈本体〉
【質量】	約1.5[kg]〈本体〉
【付属品】	バンド電極S〈ネイビー1本・グレー1本〉 バンド電極L〈ネイビー2本・グレー2本〉 出力コード〈ネイビー1本・グレー1本〉 ボトル〈1個〉 ACアダプター

本体価格：924,000円(税込)
専用カート価格：132,000円(税込)

◎ 電氣的仕様

定格電源電圧	： 100-240[V] 〈50-60Hz〉
電源入力	： 2.5[A]
消費電力	： 最大10[W]
最大出力電圧	： 100[V]
最大出力電流	： 17[mA]
出力波形	： 指数関数的漸増波
パルス幅	： 100-250μ Sec
タイマー	最長60分

ご注意

- 次のような医用電気機器との併用は、誤動作を招く恐れがありますので使用しないでください。
○ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器、心電計などの装着型の医用電気機器
- 次の方は、医師と相談の上、ご使用ください。
○悪性腫瘍のある人○心臓に障害のある人○妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ○体温38℃以上(有熱期)の人○安静を必要とする人○脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど急性疾患の人○糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人○適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など)のある人



株式会社ホーマーイオン研究所
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町17番2号



<http://www.homerion.co.jp/>

【お客様相談室】

フリーコール 0120-0842-39

[受付/9:00~17:30 土・日・祝日・弊社休業日を除く]

※携帯電話・PHSからご利用頂けます。
※都合によりお休みを頂く場合もあります。ご了承ください。

お問い合わせ先



パルスケア

3D EMS

《スリーディーイーエムエス》

3D EMS でおしり美人

《スリーディーイーエムエス》

人間で最も筋肉が多いお尻や太ももを動かす事で、エネルギーを効率的に使い、美しいヒップラインへ導きます。



運動すると美しくなる

導入メリット

- 有酸素運動や筋トレが実感できる
- 多くの部位のコンディショニングを簡単に整える
- 美と健康を追求する方に
- 理想的なボディーラインを目指す方に
- 中高年層の健康維持に
- コロナ禍でも接触を少なくしたサービスの充実に

多彩なモード設定 〈目的に合わせたフレキシブルな選択が可能〉


モード名称	モード説明
筋 ト レ	[筋肉トレーニング]を目的としたモード。筋肉を強く動かし、効率的に筋肉を鍛える運動をおこないます。
有酸素運動	[有酸素運動]を目的としたモード。筋肉を大きく動かし、軽度の負荷をかけながらエネルギーを使う運動をおこないます。
サーキット	[筋トレ]と[有酸素運動]を交互におこなうことで、短時間で効率的なサーキットトレーニングをおこないます。
ポンピング	ふくらはぎの筋肉を中心にポンピングを促し、めぐりを良くします。
クイック	膝上にバンド電極を2本装着。簡単に、[筋トレ]もしくは[有酸素運動]を選択し実施するモード。




ここが違う! 3D EMS 《スリーディーイーエムエス》

3D EMS®とは、ベルト状の特殊な3D電極を使い、電気を筒状に流して広範囲の筋肉を立体的に動かし運動を代用して、施術の効果をさらに高めます。

広範囲の筋肉を立体的に動かし、運動を代用

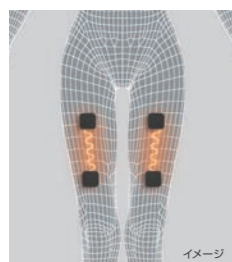

パッド電極

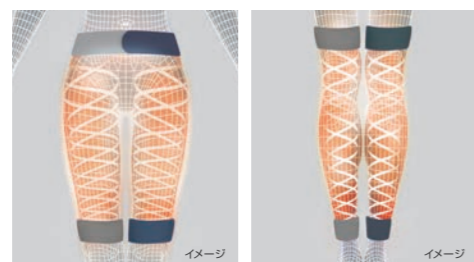

腰 - 膝上

膝上 - 足首

3D電極

高出力でも心地よい



パッド電極

人体 ☹️




3D電極

3D電極


人体 😊

簡単な装着で効率UP!

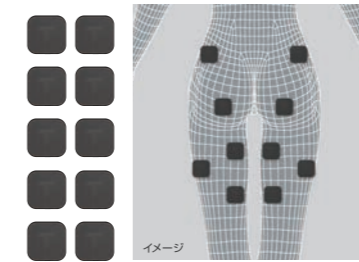

腰 - 膝上

パッド電極

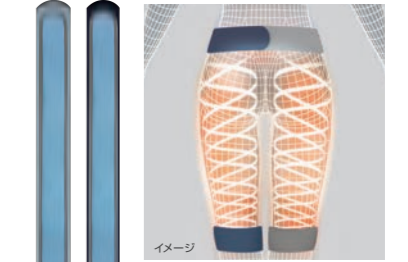

腰 - 膝上

3D電極